



**Stap 1**  
Start



- Huid gedurende één minuut desinfecteren met 1% chloorhexidine.
- Verwijder de 'flip caps' van de rubberen dopjes en desinfecteer ook de bloedkweekflessen met 1% chloorhexidine.

**Stap 2**  
Afname



- Prik bij voorkeur met een vleugelnaald. Houd de bloedkweekfles lager dan de naald, dit om terugstroom te voorkomen.
- Zet de fles rechtop tijdens het vullen om het volume af te kunnen lezen.

**Stap 2**  
Afname - Volwassenen



- Neem altijd 2 sets bloedkweken af, bij voorkeur van 2 verschillende locaties.
- Neem bij elke set eerst de aërobe fles (blauwe dop) en daarna de anaërobe fles (oranje dop). Vul de flessen met 8-10 ml bloed en meng ze 8-10 maal.
- Neem bij vermoeden van infecties van gisten, schimmels of mycobacteriën ook een myco-F-lytic fles af.

**Endocarditis**

- Bij verdenking endocarditis 3 bloedkweeksets afnemen.

**Antibiotica**


- Neem indien mogelijk vóór starten antibiotica 2 sets bloedkweken af, bij voorkeur van 2 locaties.

**Stap 2**  
Afname - Kinderen

Neem voor afname bij kinderen de Peds/Plus/F fles met roze dop.

Leeftijd	Gewicht	Bloedafname
Tot 3 jaar	Tot 15 kg	1-3 ml bloed per Peds/Plus/F fles
3-6 jaar	15-22 kg	4-6 ml bloed verdeeld over Peds/Plus/F fles
6-12 jaar	22-40 kg	15-20 ml bloed verdeeld over 1 bloedkweekset (aërobe en anaërobe fles)
> 12 jaar	> 40 kg	Conform volwassenen, 30-40 ml bloed verdeeld over 2 bloedkweeksets

**Stap 3**  
Identificatie afnamebuis

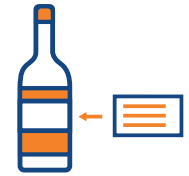

- Voorzie de flessen van naam, geboortedatum, patiëntnummer, afname-datum en tijdstip op de flessen. Etiket niet over de barcode plakken en deze ook niet verwijderen.

**Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.**

**Leiden**

- Route 32 bloedafname
- Route 92 medische microbiologie (alleen medewerkers)

**Alphen**

- Route 32 Klinische Chemie

**Leiderdorp**

- Route 144 Klinische Chemie